


**dexcomG6**

# POUR COMMENCER

Installation

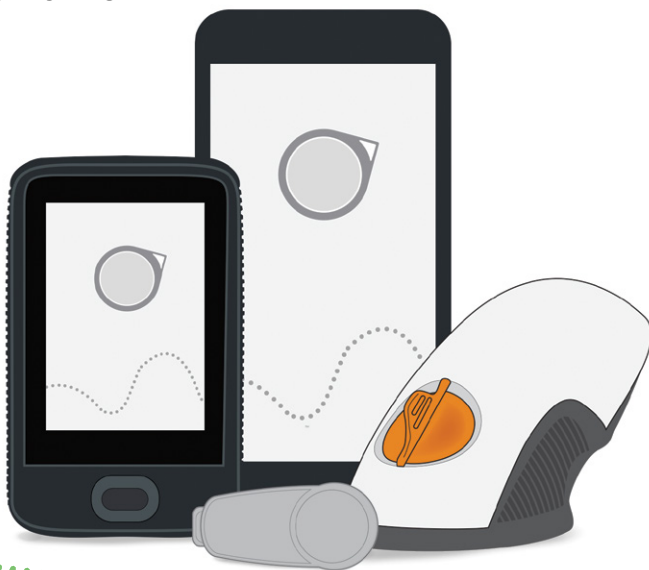


Mode d'emploi

# Aperçu du Dexcom MCG G6 (G6)

## Appareil d'affichage

- Affiche les informations concernant la glycémie
- Installez votre smartphone / tablette connecté, le récepteur Dexcom, ou les deux
- Pour obtenir une liste des smartphones/tablettes et des systèmes d'exploitation actuellement compatibles, consultez : [dexcom.com/compatibility](http://dexcom.com/compatibility)
- L'Appli G6 et le récepteur sont compatibles avec tous les systèmes G6

Votre smartphone/tablette




Récepteur Dexcom




## Applicateur avec capteur intégré

- L'applicateur du capteur insère le capteur sous votre peau
- Le capteur reçoit les informations concernant la glycémie

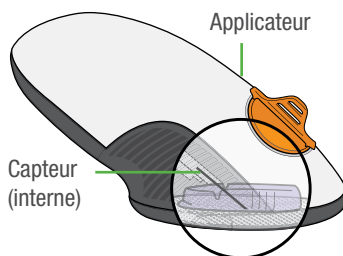

## Transmetteur

- Envoie les informations concernant la glycémie du capteur à l'appareil d'affichage

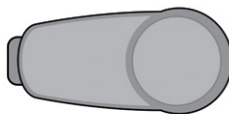

Les illustrations sont des représentations. Votre produit peut avoir une apparence différente. Avant d'utiliser votre G6, lisez la Déclaration relative à la sécurité dans *Utiliser votre G6, Chapitre 2*.

# Ses fonctions

Le G6 envoie les lectures du glucose par le capteur G6 (lectures G6) à votre appareil d'affichage.



## Choisissez Appli, Récepteur, ou les deux


Le récepteur est un dispositif médical dédié. Votre smartphone / tablette connecté n'en est pas un, même si vous pouvez y exécuter l'Appli G6. Votre smartphone / tablette connecté n'est pas un dispositif médical dédié, car l'application risque de manquer une alarme/alerte simplement parce qu'elle se trouve sur un smartphone / tablette connecté (par exemple, en raison des paramètres du smartphone / tablette connecté, de l'arrêt du smartphone / tablette connecté ou de l'appli, de la batterie faible, etc.).

### Utilisez les onglets ci-dessous pour installer votre appli, votre récepteur, ou les deux

Vous voulez installer les deux ? Choisissez celui que vous souhaitez installer en premier et reportez-vous à cet onglet. La dernière étape vous indique comment installer le deuxième appareil d'affichage. N'utilisez pas les deux onglets.

Pour accéder à d'autres méthodes d'installation de votre G6 :

- Regardez le didacticiel à l'adresse : [dexcom.com/downloadsandguides](https://dexcom.com/downloadsandguides)
- Contactez votre représentant Dexcom local pour obtenir de l'aide




Votre smartphone/  
tablette




Récepteur Dexcom




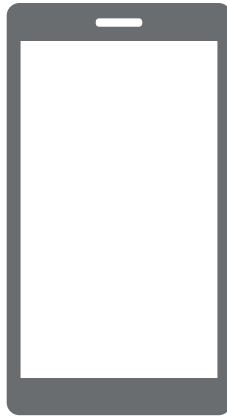

Votre smartphone/tablette

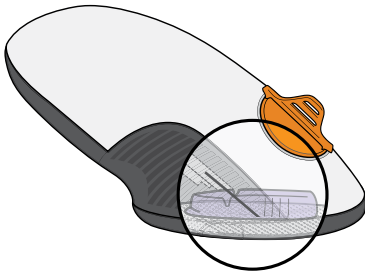

Applicateur avec  
capteur intégré

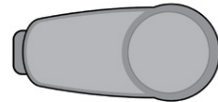

Transmetteur

**Configurer l'appli**

# Étape 1 : Configurer l'appli


## A Téléchargez et ouvrez l'appli Dexcom G6



## B Suivez les instructions d'installation à l'écran

1 Lorsque vous y êtes invité :


- Envoyez vos données sur le cloud.  
Cela vous permet d'utiliser les fonctions suivantes :
  - Share : envoi de vos données G6 à des suiveurs.
  - Clarity : réflexion sur vos données avec des médecins ; mettre des modèles en évidence (non disponible dans certaines régions)
- Saisir le code de capteur que vous insérez soit manuellement, soit en prenant une photo. Le code de capteur se trouve sur l'applicateur.

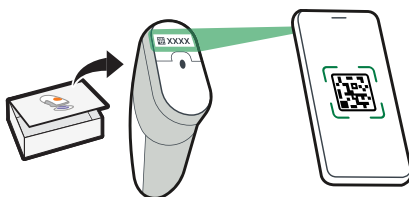

- Pas de code de capteur ?  
Reportez-vous à *Utiliser Votre G6, Annexe A Dépannage*.

- Saisir le numéro de série du transmetteur (SN) soit manuellement, soit en prenant une photo.

la boîte du transmetteur

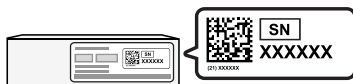

ou

le dos du transmetteur



Une fois que vous avez entré votre numéro de série, votre G6 recherche le transmetteur. Pendant la recherche, vous ne recevrez pas de lectures ni d'alarmes/alertes de votre G6.

- 2** Le chronomètre bleu d'initialisation du capteur est-il affiché ? Il indique que votre capteur s'adapte à votre corps.


Pendant l'initialisation :

- Pas de lectures, ni d'alarmes/alertes du G6
- Conservez toujours le smartphone / tablette connecté à moins de 6 mètres du transmetteur



## C Attendez 2 heures


- Lorsque l'initialisation du capteur est terminée, appuyez sur **OK** pour afficher l'écran d'accueil
- Vous recevez désormais les lectures et alarmes/alertes du G6

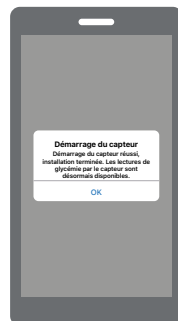

## Étape 2 : Voir *Utiliser votre G6*

Apprenez à :

- Afficher votre écran d'accueil
- Utiliser l'alarme et les alertes
- Prendre des décisions de traitement
- Dépanner des problèmes

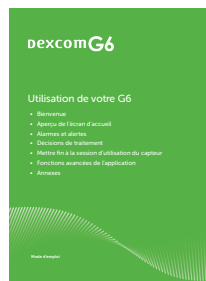


## Étape 3 : Facultatif - Configurer le récepteur

Allumez le récepteur en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 à 3 secondes. Suivez ensuite les instructions à l'écran.


N'utilisez pas l'onglet Installer le récepteur. Ces étapes décrivent l'installation du récepteur avant celle de l'appli.






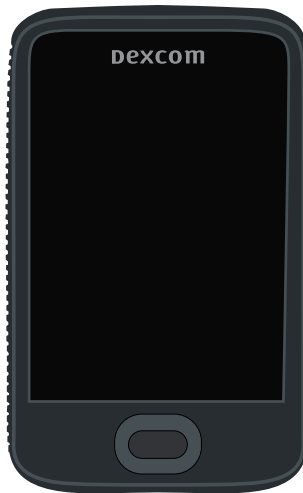

Récepteur

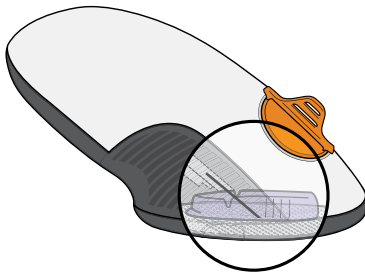

Applicateur avec  
capteur intégré

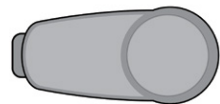

Transmetteur

**Configurer le récepteur**

# Étape 1 : Configurer le récepteur


## A Allumez le récepteur

- 1 Sortez le récepteur de la boîte
- 2 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 à 3 secondes.



## B Suivez les instructions à l'écran

- 1 Lorsque vous y êtes invité, saisissez la date et l'heure

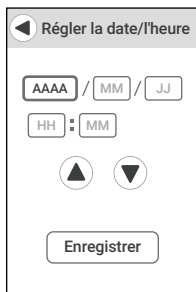


- Appuyez sur une case à l'écran.
- Appuyez sur **les flèches vers le haut et vers le bas** pour changer la valeur dans la case.
- Utilisez cette méthode systématiquement pour saisir des informations.
- Appuyez sur Enregistrer quand vous avez terminé.

Si la batterie est complètement déchargée, vous devrez réinitialiser la date et l'heure.

## 2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez votre :

- Code de capteur de l'applicateur pour capteur que vous allez insérer
  - Pas de code de capteur ?  
Reportez-vous à *Utiliser Votre G6, Annexe A Dépannage*.

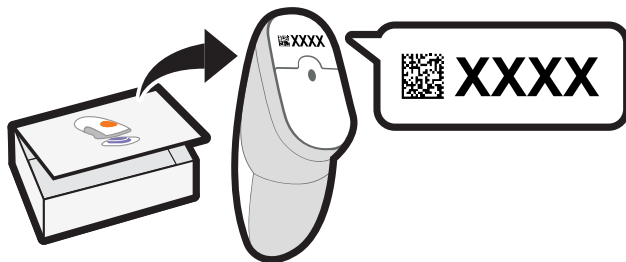

- Numéro de série (NS) indiqué sur :

la boîte du transmetteur




ou

le dos du transmetteur



Une fois que vous avez entré votre numéro de série, votre G6 recherche le transmetteur. Pendant la recherche, vous ne recevrez pas de lectures ni d'alarmes/alertes de votre G6.


## 3 L'affichage de l'écran suivant indique vous avez terminé cette étape :

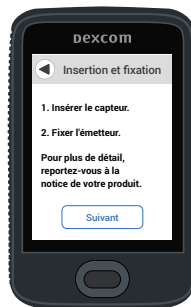

# Étape 2 : Utiliser l'applicateur pour insérer le capteur intégré

## A Sortez l'applicateur avec capteur intégré de la boîte du capteur

Réunissez le matériel : applicateur (avec le code que vous venez d'entrer), transmetteur et lingettes.

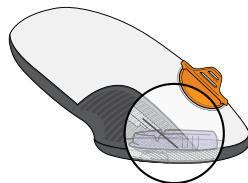


## B Choisissez le site d'insertion du capteur

À partir de 2 ans

OU


De 2 à 17 ans uniquement

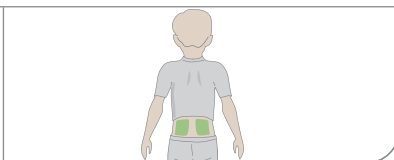


Évitez les os, la peau irritée, les tatouages et les zones abîmées.

## C Utilisez l'applicateur pour insérer le capteur intégré


- 1** Prenez l'applicateur de capteur et un tampon d'alcool.

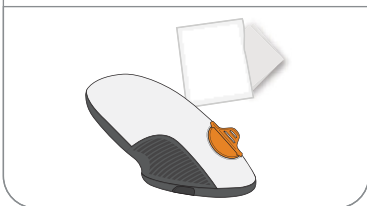


- 2** Lavez-vous les mains et séchez-les.

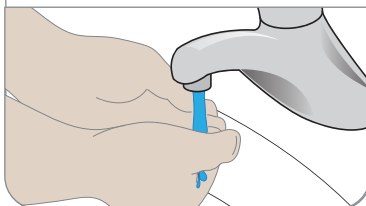


- 3** Nettoyez le site du capteur avec une lingette imprégnée d'alcool.

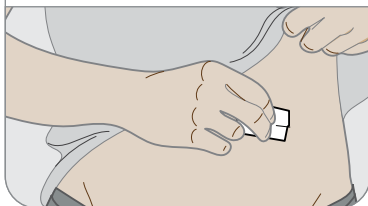


- 4** Décollez les pellicules de l'adhésif. Ne touchez pas l'adhésif.

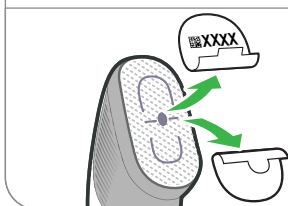


- 5** Placez l'applicateur sur la peau.

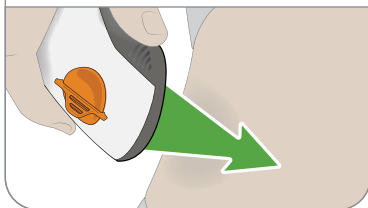


- 6** Pliez et retirez le dispositif de sécurité.

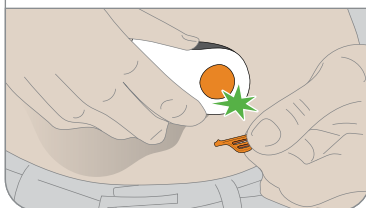


- 7** Appuyez sur le bouton pour insérer le capteur.

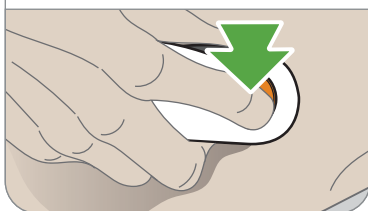

- 8** Retirez l'applicateur de la peau en laissant le patch et le support.


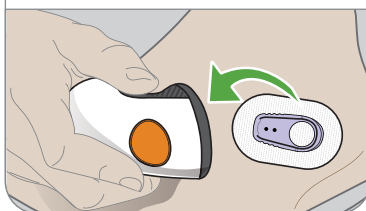


- 9** Jetez l'applicateur. Respectez les consignes locales relatives aux composants entrés en contact avec du sang.

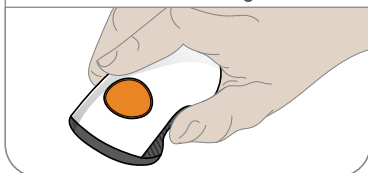


# Étape 3 : Fixer le transmetteur

## A Sortez le transmetteur de la boîte

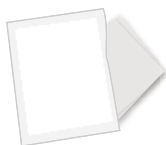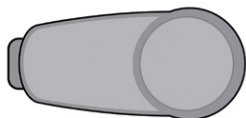


## B Enclenchez le transmetteur sur le capteur


- 1** Nettoyez le transmetteur avec une lingette imprégnée d'alcool.

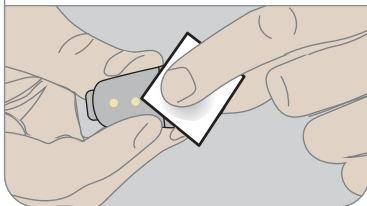


- 2** Insérez le transmetteur, avec la languette en premier, dans le support.

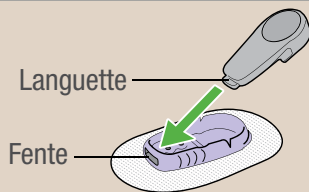

- 3** Enclenchez le transmetteur sur le capteur. Il s'enclenche en position. Vérifiez qu'il est emboîté à plat dans son support.

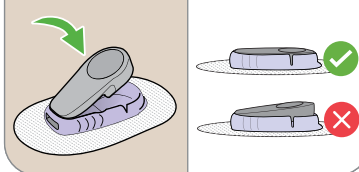

- 4** Appuyez sur le patch en faisant 3 fois le tour de l'émetteur.

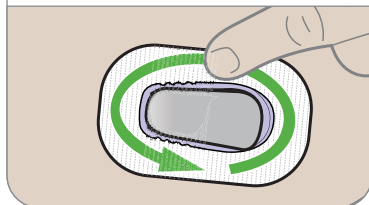

## Étape 4 : Démarrer le capteur sur le récepteur

### A Attendez jusqu'à 30 minutes pendant l'appairage

Pendant l'appairage :

- Pas de lectures, ni d'alarmes/alertes du G6
- Conservez toujours le récepteur à moins de 6 mètres du transmetteur



### B Appuyez sur Démarrer le capteur pour lancer le démarrage du capteur

Pendant le démarrage, vous ne recevrez pas de lectures ni d'alarmes/alertes de votre G6



### C Patientez


- Lorsque le processus est terminé, appuyez sur **Suivant** pour revenir à l'écran d'accueil
- Vous recevez désormais les lectures et alarmes/alertes du G6



# Étape 5 : Voir *Utilisation de votre G6*

Apprenez à :

- Afficher votre écran d'accueil
- Utiliser l'alarme et les alertes
- Prendre des décisions de traitement
- Dépanner des problèmes

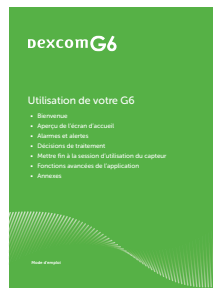

# Étape 6 : Facultatif - Configurer l'appli

Téléchargez l'appli sur votre smartphone/tablette et ouvrez-la. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

N'utilisez pas l'onglet Installer l'appli. Ces étapes permettent d'installer l'appli avant d'installer le récepteur.











© 2023 Dexcom, Inc. Tous droits réservés.

Couvert par les brevets [dexcom.com/patents](https://dexcom.com/patents)

Dexcom, Dexcom Share, Dexcom Clarity et Share sont des marques déposées de Dexcom, Inc. aux États-Unis et peuvent l'être dans d'autres pays.

# Dexcom



Dexcom, Inc.  
6340 Sequence Drive  
San Diego, CA 92121 États-Unis

+1.858.200.0200  
dexcom.com

Hors des États-Unis : Contactez  
votre représentant Dexcom local



**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

